

CARDIOSAVE® rescue

Spécifications du produit

MAQUET
GETINGE GROUP





Voici un tout nouveau paradigme en terme de support hémodynamique

CARDIOSAVE représente une avancée gigantesque en terme de fonctionnalité et de souplesse d'utilisation sans pour autant compromettre les critères de performances des pompes Maquet/Datascope de génération antérieure, que vous connaissez et en lesquelles vous avez confiance.

Grâce à son grand écran tactile, sa présentation plus petite et plus légère et son passage aisé d'une utilisation en hôpital à une utilisation en mode transport, cette pompe révolutionnaire redéfinit le traitement par contre pulsion.

CARDIOSAVE.
Pour établir une nouvelle norme de support hémodynamique.

Poignée rétractable




Écran d'affichage rétro-éclairé

Écran tactile rétro-éclairé

Écran amovible

Support d'écran sur pivot

Emplacements pour soulever la poignée

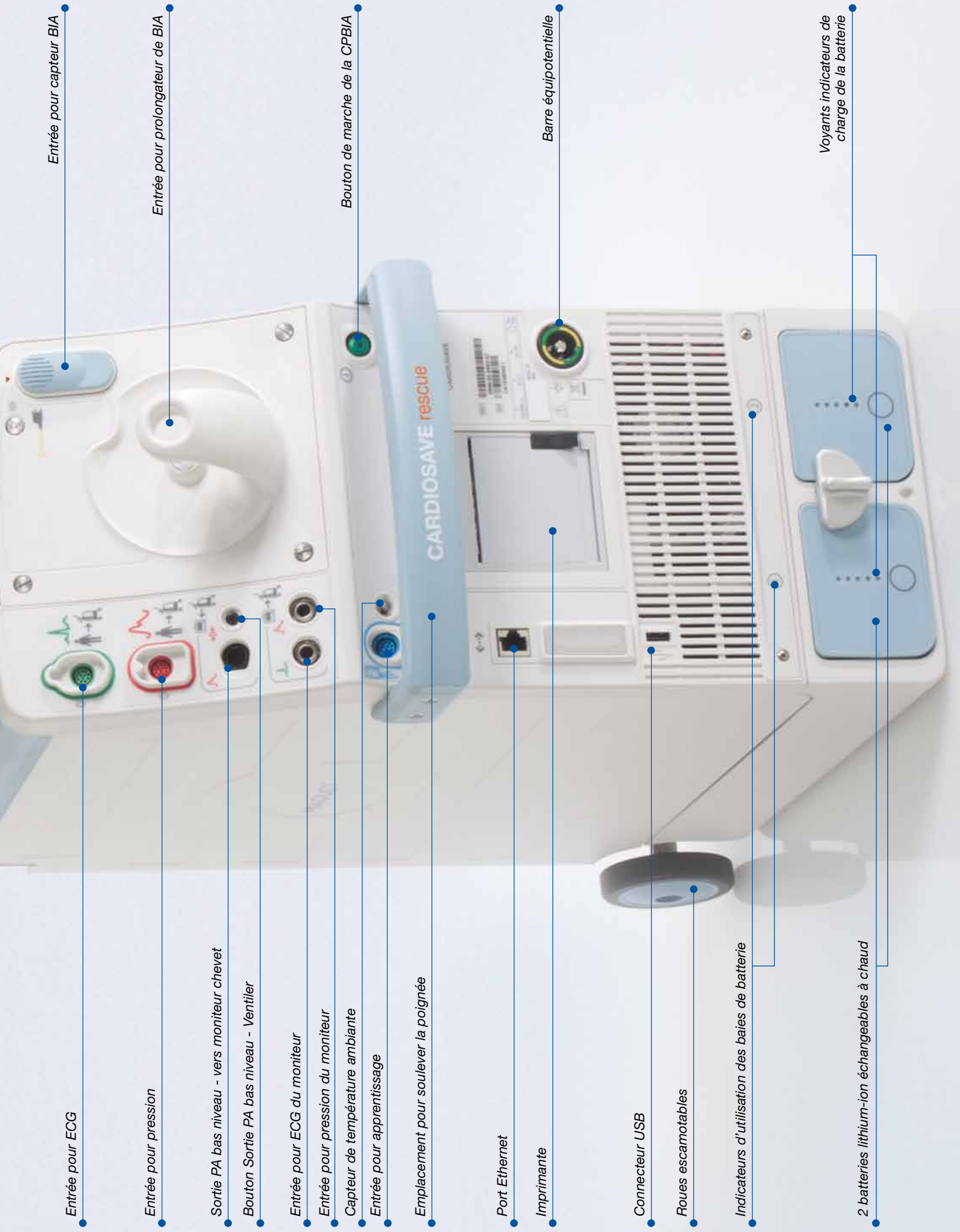

Entrée pour ECG

Entrée pour pression

Sortie PA bas niveau - vers moniteur chevet

Bouton Sortie PA bas niveau - Ventilateur

Entrée pour ECG du moniteur

Entrée pour pression du moniteur

Capteur de température ambiante

Entrée pour apprentissage

Emplacement pour soulever la poignée

Port Ethernet

Imprimante

Connecteur USB

Roues escamotables

Indicateurs d'utilisation des baies de batterie

2 batteries lithium-ion échangeables à chaud

Entrée pour capteur BIA

Entrée pour prolongateur de BIA

Bouton de marche de la CPBIA

Barre équipotentielle

Voyants indicateurs de charge de la batterie

Caractéristiques Techniques

Poids

Y compris la console, l'écran amovible et les 2 batteries
24.1kg

Tous les poids s'entendent ± 5%

Dimensions

Écran fermé - comprend la console et l'écran amovible
57,2cm hauteur x 40,6cm profondeur x 33,0cm largeur
Écran ouvert à 90° - comprend la console et l'écran amovible
78,0cm hauteur x 40,6cm profondeur x 33,0cm largeur

* Toutes les dimensions s'entendent ± 5%. Le module pneumatique est inclus dans les dimensions

Fonctionnement à température ambiante

Température de fonctionnement
10°C à 40°C

Humidité de fonctionnement

15% à 85% d'humidité relative (sans condensation)

Altitude de fonctionnement

-381,0m à 3 657,6m

1 060hPa à 644hPa

1 250 pieds à 12 000 pieds

795mmHg à 483mmHg

Vérifié à des combinaisons de température et d'humidité différentes conformément aux consignes de l'institut

« ECRI - PB- 296 892 ».

Vibration sinusoidale

EN 60068-2-6:2008 - Essais en environnement Partie 2 Essai Fc : Vibration (sinusoïdale) EN13718-1:2008 (E) section 4.6.2 qui cite ISO 7137:1995. La méthode de test est définie par RTCA/DO-160F par 8.5.1 Cat S, fuselage zone M.

Accessoires standard



Station de remplissage d'hélium



Station de charge de la batterie

Vibration aléatoire

FDA « Reviewer Guidance for Pre-Market Notification Submissions » section n.4 (iii) test de vibration aléatoire spécifié selon CEI 68-2-34, plage de fréquence 20 à 500Hz, DSM 0,02g²/Hz, durée 9mn. Non opérationnel.

Remarque : la norme CEI 68-2-34 a été remplacée par la norme CEI 60068-2-64:2008.

Pour applications au sol

EN 1789:2007 « Medical vehicles and their equipment - Road ambulances » [Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Véhicule ambulance].

Pour transport aérien

RTCA/DO-160F « Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment » [conditions environnementales et procédures de tests pour les équipements embarqués sur avion].

Test de résistance aux secousses

EN 1789:2007 - « Medical vehicles and their equipment - Road ambulances » [Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Véhicule ambulance]. Essai fonctionnel aux secousses selon CEI 60068-2-29, Test Eb, 15g, durée 6ms, 1000 fois en position de fonctionnement normale.

Essai de manutention brutale

Essai de manutention brutale - CEI 60601-1 (1988), sous-clause 21.6, avec amendement 1 (1991) et amendement 2 (1995)

Choc - Opérationnel

RTCA/DO-160F Choc, Catégorie B test opérationnel standard pour avion à voilure fixe et hélicoptères : 6g, durée 11ms, dent de scie, 3 fois dans chaque orientation

Choc - non opérationnel

EN60068-2-27:2008, Essai d'environnement Partie 2 Test Ea et directives : Choc selon Tableau 1 : 20g, durée 11ms, dent de scie, une fois dans chaque orientation (6 au total, charge fictive possible)



Alimentation mobile CA

Test de collision

EN 1789:2007 - Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. RTCA/DO-160F Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment [conditions environnementales et procédures de tests pour les équipements embarqués sur avion] : Test de sécurité de collision pour avion à voilure fixe et hélicoptère, 20g, durée 6ms, dent de scie, une fois dans chaque orientation (11 au total, charge fictive possible) Le test répond également à EN 1789:2007 - Medical Vehicles and their equipment [véhicules médicaux et leur équipement], section 6.3.5.

Test des seuils d'élévation

ECRI PB-296892*, Section AIII.3.1

Test d'impact

ECRI PB-296892*, Section AIII.3.2.2

Test de résistance aux chutes

ECRI* AIII.3.3 pour dispositif classe 2 (Test 1 - boule d'acier/ dispositif au sol)

Test de basculement

CEI 60601-1, 1988 (plus amendement 1:1991, amendement 2 : 1995 et Corrigendum, Juin 1995) Section 4, Clause 24, Page 119

* Département du Commerce des États-Unis, National Technical Information Service, PB-296 892 « Development of Environmental Test Methods for Non-Implantable Devices » élaboré par l'Emergency Care Research Institute (ECRI) pour la Food and Drug Administration, (FDA) avr. 1979.

Conformité avec les organismes

EN60601-1:1990 +A1:1993, + A2:1995 = 2^{ème} édition

EN60601-1-2:2007

EN60601-1-8:2007

EN60601-2-34:2000^{1,2}

UL 60601-1:2003

CSA C22.2 - No. 601.1 - M90

CSA C22.2 - No. 601.1S1 - 94

Directive CE relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE

Conformité WEEE : ce système est conforme à la directive de la Communauté européenne 2002/96/CE relative à la gestion des déchets.

¹ Au cours des essais avec les transducteurs de pression jetables de Baxter, modèle PX 600 ou d'Abbott®, modèle 42582-05.

² La technologie et les fonctions d'auto étalonnage associées au capteur fibre-optique obligent à s'écarter des exigences d'essai stipulées dans les sections 51.102.1 (sensibilité, répétabilité, non linéarité, dérive et hystérésis) et 51.102.2 (précision de la pression systolique et diastolique) de la norme CEI 60601606012-34:2000. Les exigences d'essai stipulées dans ces deux sections ont été remplies en utilisant des méthodologies équivalentes élaborées par Maquet.

Informations de Commande

Produit	Numéro de référence
CARDIOSAVE Rescue	0998-00-0800-83

Accessoires livrés avec le CARDIOSAVE Rescue

Bloc-batterie CARDIOSAVE (quantité 2)
Station de remplissage d'hélium CARDIOSAVE
Station de charge de la batterie CARDIOSAVE
Alimentation mobile CA CARDIOSAVE
Bouteilles d'hélium

Kit d'accessoires CARDIOSAVE :

- Câble de raccord pour transducteur de pression CARDIOSAVE
- Câble de jonction ECG - 5 dérivations CARDIOSAVE
- Fils de dérivation ESIS 50 pouces - 5 dérivations (salle d'op) CARDIOSAVE
- Câble de signal externe
- Manuel d'utilisation - DVD CARDIOSAVE
- Fiche luer mâle non bloquante CARDIOSAVE (paquet de 5)
- Rondelle pour bouteille d'hélium (paquet de 5)
- Kit de départ de papier graphique pour thermogravure
- Tampons nettoyants pour fibre optique (paquet de 5)
- Nettoyant pour connecteur à fibre optique
- Housse de protection en plastique CARDIOSAVE
- Clé Allen CARDIOSAVE

MAQUET
GETINGE GROUP

Maquet
1300 MacArthur Blvd., Mahwah, NJ 07430, USA
Téléphone : +1 201 995 8700

www.maquet.com
<http://ca.maquet.com>

GETINGE GROUP

Getinge Group est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, Getinge et Maquet. ArjoHuntleigh se consacre à la mobilité des patients et au traitement des plaies. Getinge propose des solutions de lutte contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. Maquet se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales, à la cardiologie interventionnelle et aux soins intensifs.